

SolRx™ Serie-E

¡EXPANDIBLE!

¡Pruebe un equipo por sí sólo, luego en cualquier momento agregue equipos para EXPANDIR su sistema y reducir tiempos de tratamiento!

Receptáculos para equipos Adicionales

Los soportes sujetan el equipo Maestro a la pared para minimizar espacio en el piso. El equipo tiene sólo 7.6 centímetros de espesor. La instalación toma menos de 10 minutos

Las bisagras incorporadas conectan los equipos de modo que se abren y cierran como una puerta (0-180 grados)

El confiable temporizador regresivo digital con pantalla roja de LED es fácilmente visible a través de las gafas UV suministradas.

Interruptor con llave para prevenir el uso no autorizado

Los reflectores multi-caras de aluminio anodizado aumentan la salida de luz UVB

Dos lámparas de 6 pies de largo, Philips TL100W/01 UVB-Banda Estrecha o FS72T12/UVB/HO UVB-Banda Ancha. Estos son exactamente las mismas lámparas usadas en clínicas de fototerapia.

Asas para mover y transportar
Cada equipo pesa sólo 33 libras

Construido con componentes eléctricos comunes y un mínimo de partes plásticas para más eficientes reparaciones a largo plazo.




Construcción en calibre 18 & 20 y pintura pulverizada, sólidamente sujeta con contra-tuercas de Nylon para durabilidad

La rejilla de protección se quita fácilmente para acceder a las lámparas

Usa alimentación eléctrica estándar
No requiere electricidad especial

Las lámparas son diseñadas tan cerca del suelo como posible para minimizar al pacientela necesidad de usar una plataforma paratratar la pierna baja

Deslizadores de huella grande y baja fricción sobre el piso para fácil posicionamiento de los equipos

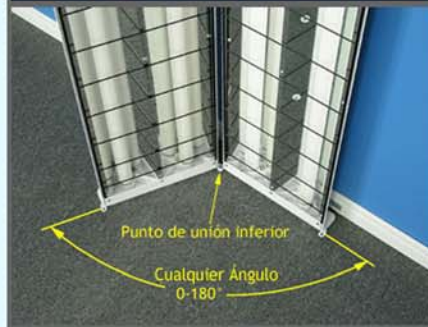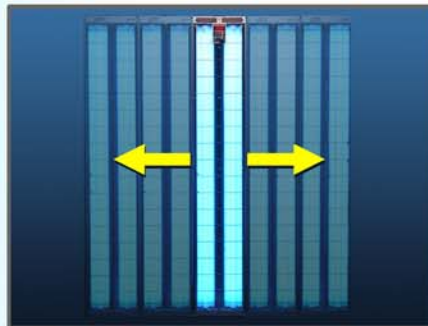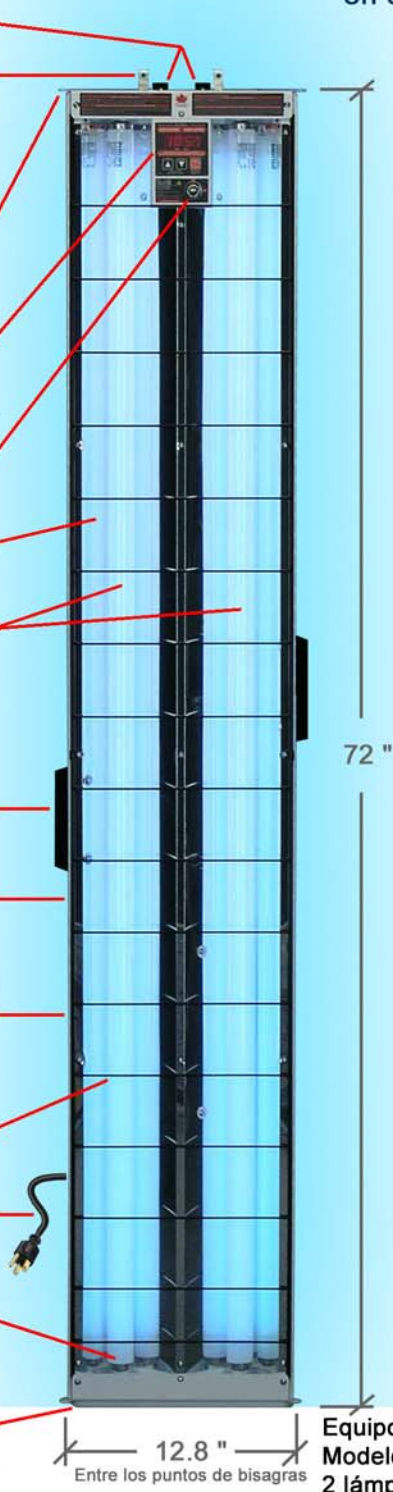

Equipo Maestro
Modelo E720M-UVBNB
2 lámparas, 200 Vatios



El **SolRx Serie-E** es el único sistema modular de fototerapia en el mundo que puede expandirse desde un panel de bajo costo, hasta una altamente eficiente cabina multidireccional de envoltura completa. Es la solución perfecta para que no esté seguro sobre la fototerapia, o para aquellos que simplemente quieren lo mejor.

Para tratamiento de psoriasis, vitiligo y eczema.

Favor de ver SolarcSystems.com para mucho más información



